

TOTAL ENT SOLUTION

Global Leader megaMEDICAL

1995년 창립, 전 세계 40여 개국 수출.
이비인후과 전문 의료기기 개발 및 제조의 선두주자.
최적의 진료 환경을 위한 토탈 솔루션을 제공합니다.



글로벌
수출 기업



첨단
R&D 기술



맞춤형
솔루션

1995 Since

회사 창립 연도

40+

수출 국가 수

KFDA/CE

국내외 인증 보유 메가메디칼 국내영업팀 이현균 대리



New Product



Small Size



Large Size

신제품 출시

노즈피스-비강 접근 가이드

부비동 및 두개저 수술 맞춤 솔루션



안전한 수술 접근 경로 확보

내시경 및 수술 기구 삽입을 위한 물리적 통로 형성



비강 조직 손상 0건 (Dubach 2024)

기구 진입 시 물리적 장벽을 형성하여 점막 및 전정부 손상을 완벽하게 예방합니다.



환자 맞춤형 2가지 규격 제공

생체적합성 Medical Grade 실리콘, 2가지 사이즈(2338/2348)로 최적의 착용감을 제공합니다.

New Product



Small Size



Large Size

신제품 출시

노즈피스-비강 내 접근 가이드

임상 연구로 검증된 안전성과 경제적 효율성



렌즈 오염 39.9% 감소 (Velasquez 2021)

수술 시야를 선명하게 유지하여 수동 렌즈 세척 빈도를 61%까지 획기적으로 줄여줍니다.



수술 시간당 \$36-66 비용 절감

수술 중단 시간을 최소화하여 운영 효율성을 높이고 비용 절감 효과를 제공합니다(Barkhoudarian 2024).



100% 의료용 실리콘 & 맞춤 규격

생체적합성 Medical Grade 실리콘, 2가지 사이즈(2338/2348)로 최적의 착용감을 제공합니다.

임상 근거 및 연구 데이터 (Clinical Evidence)

시야 오염 및 세척 감소

Velasquez et al. 2021
Univ. of Pittsburgh (J Neurol Surg B)

39.9% ↓ 렌즈 오염(Lens Soiling) 감소
(Mean 3.43 → 2.06, $p < 0.001$)



61.0% ↓ 수동 렌즈 세척 동작 감소
(Mean 1.46 → 0.57, $p = 0.001$)

수술 효율성 및 비용 절감

Barkhoudarian et al. 2024
Operative Neurosurgery

4.19% 수술 후반부 시야 가림 시간
(vs Control 12.97%, $p < 0.001$)

0.66회 분당 렌즈 세척 횟수 (Last 3rd)
(vs Control 1.67회/min, $p < 0.001$)

수술 시간 절약으로 분당 \$36-66 비용 절감 효과 기대

조직 손상 방지 및 안전성

Dubach et al. 2024
Switzerland (Am J Otolaryngol)

0건 비강 입구 열상 및 조직 손상

✓ DCR 27차례, MM 6차례 전수 조사 결과: 조직 손상 없음 (Safety 100%)

MDRPU 예방 및 통증 관리

Miyashita et al. 2023
Japan (Auris Nasus Larynx)

20.5% 일반적인 수술 후
의료기기 압박 궤양(MDRPU) 발생률

보호 조치 적용 시 임상 결과:

- 비강 바닥 부위 통증(NRS) 유의하게 감소 ($p < 0.05$)
- 수술 후 2-3일차 흉반 발생 감소 경향 확인

비강 접근 가이드 규격 비교 및 임상 효과

Standard



MG-NP-2338
Ø16×25
Ø22×28

Long Type



MG-NP-2348
Ø23×38×Ø23
Ø23×48×Ø23

규격 (외경×길이)	MG-NP-2338 Ø23 × 38mm × Ø23	MG-NP-2348 Ø23 × 48mm × Ø23
권장 해부학	MG-NP-2338 중·소형 비강 구조, 일반적인 접근	MG-NP-2348 깊은 비강 구조, 긴 경로 확보 필요 시
소재 및 특징	✓ 100% 의료용 실리콘 (점막 자극 최소화) ✓ 생체적합성 우수 (Biocompatibility)	✓ EO 가스 멸균 (감염 위험 차단) ✓ 단일 환자용 (교차 감염 방지)

사용법 및 단계별 임상 효과



Clinical Evidence Summary

본 제품 사용 시 수술 시간 단축(청소 빈도 0.95→0.66회/분) 및 비강 조직 보호 효과가 임상 연구(Barkhoudarian 2024 등)를 통해 입증되었습니다.

차별화 포인트 및 가치 제안



임상 성능

Clinical Performance

- ✓ 정밀 수술 환경 조성
시야 방해 요인과 청결 중단 감소로
고난이도 수술 시 집중력 유지
- ✓ 조직 보호 효과
비강 전정부 직접 보호로 출혈,
통증, 유착 위험의 근본적 완화



Quality of Surgery 수술 결과
및 환자 만족도 향상



워크플로우 & 경제성

Workflow & Economics

- ✓ 수술 효율성 극대화
청결 중단 시간 단축을 통해
전체 수술 시간(OR Time) 절감
- ✓ 팀 스트레스 감소
다양한 도구 호환 및 빠른 셋업으로
수술 팀의 업무 피로도 경감



Cost Saving 분당 OR 비용 절
감 효과 기대



디자인 & 안전성

Design & Safety

- ✓ Medical Grade 소재
100% 의료용 열경화성 실리콘 적용,
유연하면서도 내구성이 뛰어남
- ✓ 최적화된 규격
환자 해부학적 구조에 맞춘
2가지 규격 옵션 제공



Patient Safety 생체적합성
및 무해성 보장

메가메디칼과 함께 병원의 가치를 높여보세요

혁신적인 솔루션 도입으로 기대할 수 있는 핵심 가치




임상 효율 향상

정밀한 시야 확보와 청결 유지 시간 단축으로 수술 효율성을 극대화합니다.



환자 보호 강화

불필요한 비강 조직 손상을 예방하여 환자의 안전과 빠른 회복을 지원합니다.

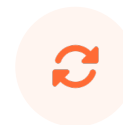

워크플로우 최적화

빠른 셋업과 직관적인 사용성으로 수술 팀 전체의 업무 흐름을 개선합니다.

도입 문의 및 상담

전문 영업팀이 병원 환경에 맞는 최적의 솔루션을 제안해 드립니다.

We Do Your ENT, With Your ENT | megaMEDICAL

CONTACT PERSON

국내영업팀 **이현균** 대리

PHONE & EMAIL

 010-4485-5802

 hglee@megamedical.co.kr